

ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.


La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

- El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

| Nº | PRODUCTO | REF. | CANT. |
|----|------------------------------|-------|-------|
| 1 | SONDA DE EXFOLIACIÓN | 10018 | 1 |
| 2 | PROTECTOR | - | 1 |
| 3 | PULSERA | 10019 | 1 |
| 4 | UNIDAD PRINCIPAL | - | 1 |
| 5 | CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | - | 1 |

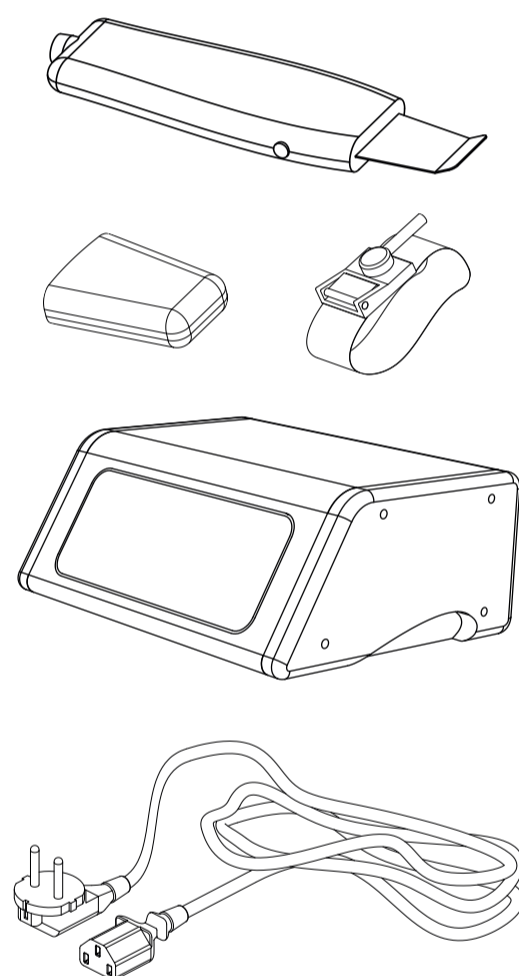

PANEL FRONTAL/PANEL TRASERO

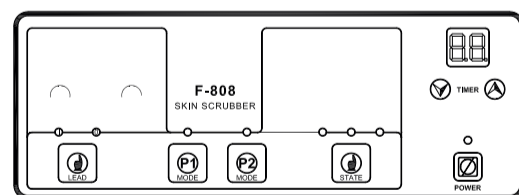

ADVERTENCIA

- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

- Debe colocarse sobre un carrito de belleza.

- Tiene que ser usado en una zona donde el cable de la sonda sea accesible (en 0,5m).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

FICHA TÉCNICA

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Pesos y tamaños | Tamaño embalaje (cm) | 39x36x18,5 |
| | Peso bruto (Kg) | 4,3 |
| | Tamaño consola (cm) | 33x17/24x13 |
| Características de trabajo | Potencia de trabajo | 6 W |
| | Frecuencia de trabajo | 25 • 27 KHz |
| | Tiempo de trabajo preestablecido | 15 min |
| Características eléctricas | Voltaje nominal | 220V ~ 240V |
| | Frecuencia | 50Hz/60Hz |
| | Potencia nominal | 29 W |


incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

PACKAGE CONTENTS

- These components are subject to change without prior notice.
- Appearance of product may differ from the image.

| No. | PRODUCT | REF. | QTY. |
|-----|---------------------|-------|------|
| 1 | SKIN SCRUBBER PROBE | 10018 | 1 |
| 2 | SAFENER | - | 1 |
| 3 | BRACELET | 10019 | 1 |
| 4 | MAIN UNIT | - | 1 |
| 5 | FEEDER CABLE | - | 1 |

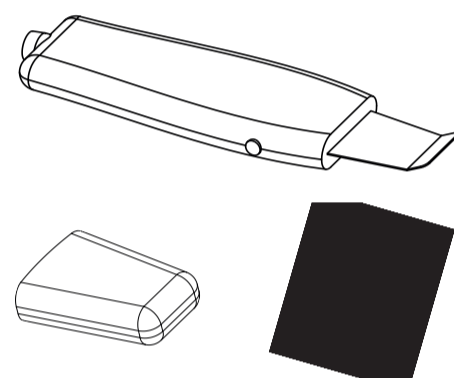

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.
- It must be placed on a beauty trolley.
- It must be used in an area where the probe wire can be accessed (within 0.5 m).
- Do not use it with 2m of accessible gas.
- Power wire and machine frame shall be used with 1,5m.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC

RECYCLING

WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to

TECHNICAL SHEET

| | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| Weights and sizes | Packing size (cm) | 39x36x18,5 |
| | Gross weight (kg) | 4,3 |
| | Product size (cm) | 33x17/24x13 |
| Working characteristics | Working power | 6 W |
| | Working frequency | 25 - 27 KHz |
| | Preset working time | 15 min |
| Electrical characteristics | Rated voltage | 220V ~ 240V |
| | Frequency | 50Hz/60Hz |
| | Rated power | 29 W |

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.


L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

- L'apparence du produit peut différer de l'image.

| No. | PRODUIT | RÉF. | QTÉ. |
|-----|---------------------|-------|------|
| 1 | SONDE D'EXFOLIATION | 10018 | 1 |
| 2 | PROTECTEUR | - | 1 |
| 3 | BRACELET | 10019 | 1 |
| 4 | UNITÉ PRINCIPALE | - | 1 |
| 5 | CÂBLE ALIMENTATION | - | 1 |

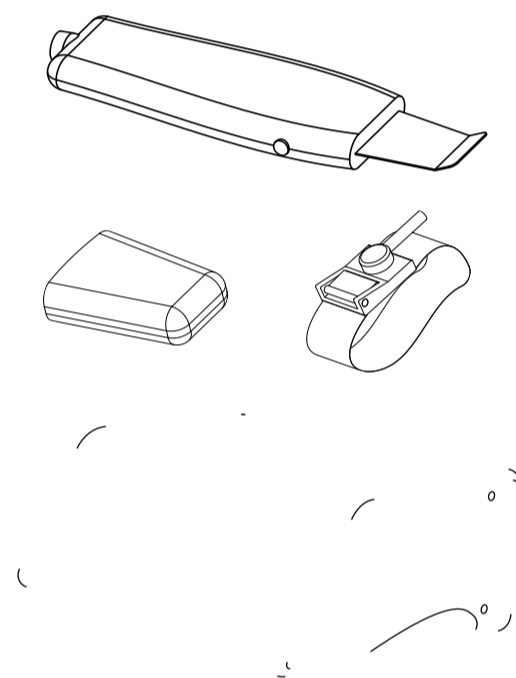

ADVERTISSEMENT

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

- Il doit être placé sur un guéridon.

- Il doit être utilisé dans un endroit où le câble de la sonde peut être branché (environ 50 cm).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes :

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

RECYCLAGE

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

SPÉCIFICATIONS

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------|
| Poids et taille | Taille de l'emballage (cm) | 39x36x18,5 |
| | Poids brut (kg) | 4,3 |
| | Dimensions produit (cm) | 33x17/24x13 |
| Caractéristiques de travail | Puissance de travail | 6 W |
| | Fréquence de travail | 25 - 27 KHz |
| | Temps de travail | 15 min |
| Caractéristiques électriques | Tension nominale | 220V ~ 240V |
| | Fréquence | 50Hz/60Hz |
| | Puissance nominale | 29 W |


Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

PACKUNGSIHALT

- Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

| Nr. | PRODUCT | REF. | QTY. |
|-----|----------------|-------|------|
| 1 | SCRUBBER SONDE | 10018 | 1 |
| 2 | SCHÜTZKAPPE | - | 1 |
| 3 | ARMBAND | 10019 | 1 |
| 4 | HAUPT EINHEIT | - | 1 |
| 5 | STROMKABEL | - | 1 |

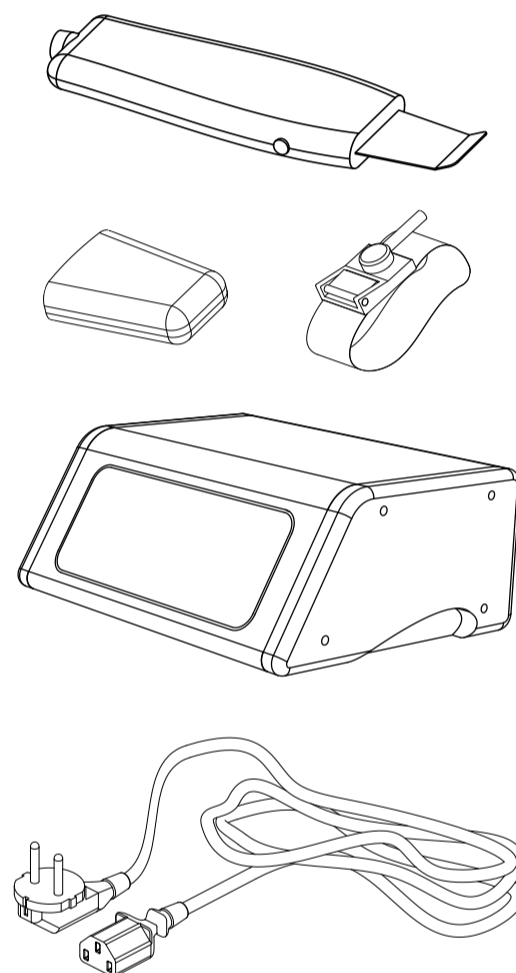

WARNUNG

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.

- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.

- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

- Muss auf den Kosmetikwagen gelegt werden.

- Muss in einem für den Sondendraht zugänglichen Bereich eingesetzt werden ($\geq 0,5\text{m}$).

EC-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC


2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EC

RECYCLING

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

SCHALTTAFEL/HINTERE SCHALTTAFEL

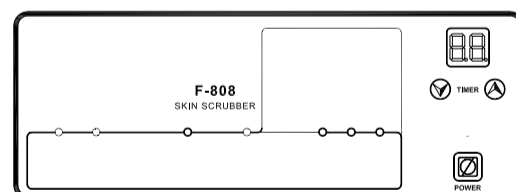

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| Gewicht und Abmessungen | Verpackungsgröße (cm) | 39x36x18,5 |
| | Bruttogewicht (kg) | 4,3 |
| | Produktabmessungen (cm) | 33x17/24x13 |
| Technische Daten | Arbeitsleistung | 6 W |
| | Arbeitsfrequenz | 25 - 27 KHz |
| | Voreingestellte Arbeitszeit | 15 min |
| Elektrische Daten | Nennspannung | 220V ~ 240V |
| | Frequenz | 50Hz/60Hz |
| | Nennleistung | 29 W |